

Chère Utilisatrice, Cher Utilisateur,

Avec **Aqualarm® U.P. intensive**, vous avez choisi un produit qui humidifie, rafraîchit agréablement et apaise vos yeux et procure un soulagement durable des symptômes typiques causés par les troubles de l'humidification. Dans son Récipient MultiDose innovant et exempt d'agents conservateurs, possédant un mécanisme de pompe breveté, Aqualarm® U.P. intensive répond aux exigences des solutions d'humidification modernes.

- ✓ Aqualarm® U.P. intensive est exempt d'agents conservateurs
- ✓ Aqualarm® U.P. intensive se conserve 12 semaines (3 mois) après ouverture
- ✓ Aqualarm® U.P. intensive contient de l'acide hyaluronique, polymère naturel également présent dans les structures de l'œil humain et dans le film lacrymal naturel
- ✓ Aqualarm® U.P. intensive est par conséquent très bien toléré
- ✓ Aqualarm® U.P. intensive peut être utilisé à long terme
- ✓ Aqualarm® U.P. intensive convient pour l'humidification rémanente des lentilles de contact souples aussi bien que des lentilles de contact dures et améliore sensiblement le confort du port de lentilles de contact durant toute la journée.
- ✓ Aqualarm® U.P. intensive s'utilise facilement et de façon sécurisée
- ✓ Aqualarm® U.P. intensive permet le dosage précis d'une seule goutte.

Veillez lire attentivement ce mode d'emploi – il contient des informations importantes pour l'utilisation de ce produit. Si vous avez des questions, veuillez vous adresser à votre pharmacien, votre médecin ou à nous tout simplement.

Quels conditionnements sont disponibles ?

Aqualarm® U.P. intensive est disponible en flacon de 10 ml.

La solution contient de l'acide hyaluronique à 0,24% et des excipients et est dépourvue d'agent conservateur.

Quand devez-vous utiliser Aqualarm® U.P. intensive ?


Lors de troubles de l'humidification de la surface de l'œil, provoquant des symptômes tels qu'une sensation de sécheresse de l'œil, une brûlure ou une fatigue oculaire. Ces symptômes sont souvent dus au travail sur écran ou au fait de regarder la télévision pendant une période prolongée, à l'air ambiant sec, au chauffage, à la climatisation, à la fumée de cigarettes ou aux courants d'air. De même, les agents conservateurs de certains collyres, certaines affections, la prise de certains médicaments (comme par exemple la pilule contraceptive) peuvent jouer un rôle important dans l'apparition des troubles de l'humidification. Aqualarm® U.P. intensive améliore l'humidification de la surface de l'œil et l'humidification rémanente durant le port de lentilles de contact souples et dures. Il rafraîchit et apaise notablement les yeux.

Combien de fois devez-vous utiliser Aqualarm® U.P. intensive ?


Selon vos besoins, instillez 1 goutte d'Aqualarm® U.P. intensive dans le sac conjonctival. Etant donné que Aqualarm® U.P. intensive est exempt d'agents conservateurs, vous pouvez l'utiliser quotidiennement aussi fréquemment que souhaité, il est également bien toléré en cas d'utilisation permanente.

Vous utilisez Aqualarm® U.P. intensive de la façon suivante :

Aqualarm® U.P. intensive dispose d'un mécanisme de pompe brevetée et il s'utilise de façon sûre et simplement. Avant chaque utilisation, enlever le capuchon de protection de l'embout de flacon (fig. 1). Eviter tout éventuel contact de l'embout du flacon avec les doigts.

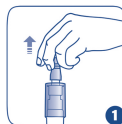


La figure 2 décrit comment tenir le produit pour l'instiller de façon sûre et confortable. Placez le pouce et l'index sur la plaque de pression circulaire située en haut du flacon et l'auriculaire à la base du flacon. Vous pouvez soutenir le flacon latéralement au moyen du majeur et de l'annulaire.

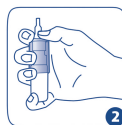

Avant la première utilisation, quelques mouvements de pression sont nécessaires afin d'activer le mécanisme de pompage (fig. 3). Tenez le flacon tête en bas comme sur le schéma.



Pour l'utilisation, penchez la tête légèrement vers l'arrière et tenez le flacon compte-gouttes au-dessus de votre œil, comme le montre la figure 4. Avec l'index de la main libre, tirez la paupière inférieure légèrement vers le bas et veillez dans la mesure du possible à tenir le flacon compte-gouttes à la verticale. Evitez le contact de l'embout du flacon avec les doigts, l'œil ou la lentille de contact.

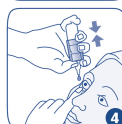

Afin d'instiller une goutte d' Aqualarm® U.P. intensive dans le cul de sac conjonctival inférieur, appuyez brièvement, mais fermement, sur le flacon. Grâce au dosage automatique, une goutte est libérée exactement à chaque pompage. Fermez maintenant votre œil et bougez-le lentement dans tous les sens afin de répartir la solution ophtalmique sur la surface de l'œil de façon optimale.

Refermez l'embout du flacon avec le bouchon immédiatement après utilisation.

A quoi faut-il veiller lors de l'utilisation d' Aqualarm® U.P. intensive ?


Pour une meilleure tolérance, Aqualarm U.P. intensive ne contient pas d'agents conservateurs. Grâce au mécanisme de pompe brevetée, Aqualarm U.P. intensive est utilisable jusqu'à 12 semaines (3 mois) après la première utilisation. Veuillez ne plus utiliser Aqualarm® U.P. intensive après la date d'expiration. Dans de très rares cas, des réactions d'hypersensibilité peuvent survenir. Si cela arrive, n'utilisez plus le produit. N'utilisez pas Aqualarm® U.P. intensive si le flacon est endommagé.



Fabricant du dispositif médical: Chauvin ankerpharm GmbH - une société du groupe Bausch & Lomb, Brunsbütteler Damm 165-173, D-13581 Berlin

Distributeur: Laboratoire Chauvin Montpellier, 416 rue Samuel Morse - 34000 Montpellier - France

STERILE A

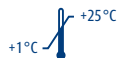

Stockage du dispositif médical à une température comprise entre + 1 °C et + 25 °C



Ne pas utiliser si le flacon est endommagé !



Après la première utilisation, le dispositif médical se conserve 3 mois.



Date d'expiration



Désignation du lot

Aqualarm® U.P. intensive: 09.2008